

Ортоимплантаты



Ортоимплантаты предназначены для вкручивания в десну с целью обеспечения стабилизирующей опоры. В отличие от стоматологических, ортодонтические имплантаты изготавливаются не из титана, а из нержавеющей медицинской стали, что способствует более беспрепятственному извлечению имплантата после лечения. Это обусловливается тем, что структура стали более плотная, благодаря чему не происходит прорастание костной ткани в имплантат. Для работы по установке имплантата необходим комплект, в который входят: ручка, переходник и имплант в стерильной упаковке.


Данные ортоимплантаты имеют ряд преимуществ:

- Саморезущую резьбу – не требует создания дополнительных перфораций во время установки, за исключением случаев чрезвычайно твердой кортикальной пластинки.
- Конусообразную шляпку винта во избежание компрессии окружающих тканей.
- имплантат в упаковке – стерилен и не требует дополнительной обработки.

Многогранность клинического применения ортоимплантатов поражает. Особенно важно то, что данные аппараты являются хорошей альтернативой традиционной опоре в ортодонтии, не способной действовать постоянно и упрощать работу. Так, например, ведущими специалистами в области стабилизирующей опоры с помощью имплантатов этот метод достаточно давно применяется для:

- Интрузии верхнечелюстных резцов (при глубоком прикусе и десневой улыбке),
- Интрузии боковой группы зубов для лечения открытого прикуса консервативным (не хирургическим) методом.
- Ретракция по типу en-masse при закрытии постэкстракционных промежутков. Происходит с большим контролем и с меньшими побочными эффектами (деформация окклюзионной плоскости, мезиализация моляров, уменьшение экстрозионного компонента боковой группы зубов при высоком угле).
- Закрытие нижнечелюстных промежутков за счет мезиализации моляров.
- Устранение феномена Попова-Годона.
- Устранение перекрестных взаимоотношений в области отдельных зубов.

Таблица размеров Имплантатов

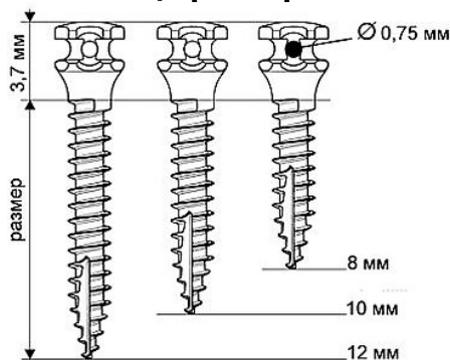

Вся представленная продукция зарегистрирована в РФ и имеет сертификат соответствия ГОСТ Р.

ООО «РЕАЛДЕНТ»

394006, г. Воронеж, ул. Красноармейская, 60

Тел./факс 8 4732 77-64-77, 71-49-54

www.realdentcom.ru

realdent@mail.ru