

Пасты crea.lign
Таблицы сочетания цветов



| crea.lign Эмаль | Классические цвета A-D | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|------------------------|----|----|------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|
| | A1 | A2 | A3 | A3.5 | A4 | B1 | B2 | B3 | B4 | C1 | C2 | C3 | C4 | D2 | D3 | D4 | BL3 |
| E1 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| E2 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| E3 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| E4 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

В качестве дополнения ко всем дентиновым и эмалевым массам можно использовать прозрачную массу для индивидуализации Transpa oral.

| Опакер crea.lign | Цвета системы | | | | | | | | |
|------------------------|---------------|----|----|---------------|-------------------|---------|------|---------|----|
| Цвета системы | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Классические цвета A-D | A1 / B2 | A2 | A3 | B1 / C1 / BL3 | C2 - C3 / D2 / D4 | B3 / B4 | A3.5 | A4 / C4 | D3 |

В качестве дополнения к опакеру crea.lign 1-9 в ассортименте опакеры crea.lign GUM и crea.lign Z.
Опакер GUM подходит ко всем оттенкам GUM. Опакер Z предназначен специально для каркасов из диоксида циркония.

crea.lign

Облицовочный композит

Выбор паст

© 2018 Автор: з/т Андреас Людтке (Andreas Lüdtkе), Байройт, Германия

Склонность к изменению цвета [ΔE]

Окрашивающие вещества:
Выдерживание в кофе,
чае, табаке, красном вине и
метиленовом синем

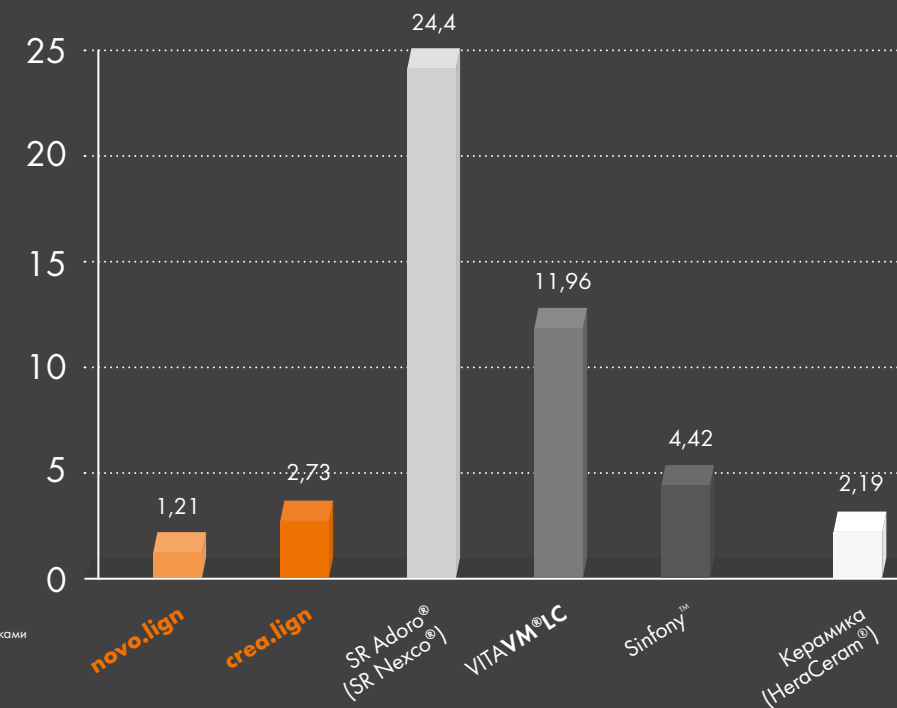


График
«Склонность к изменению цвета [ΔE]»
© Отчет об исследовании от 07 мая 2012 г.,
А. Жанин (A. Rzapny) и Р. Гебель (R. Göbel),
Университетская клиника Иены, Германия

Все названия, обозначенные символом ® или ™, являются защищенными торговыми марками и/или фирменными знаками сторонних правообладателей.

Паста crea.lign
Облицовочный композит



create natural beauty

bredent group

009907RU-20181008

Компания оставляет за собой право на ошибки и внесение изменений



create natural beauty

powered by
visio.lign

Обращайтесь пожалуйста в соответствующий филиал bredent group или к нашим дистрибьюторам в Вашем регионе.
bredent GmbH & Co. KG · Weissenhorner Str. 2 · 89250 Senden · Germany · Т: +49 7309 872-443 · Ф: +49 7309 872-444 · www.visio.lign.com · @: info@bredent.com

БЕЗ ГРАНИЦ
Все пасты crea.lign подходят для использования с гелевыми массами crea.lign и опакерами и предусматривают возможность комбинированного применения без видимых переходов.

crea.lign — слои

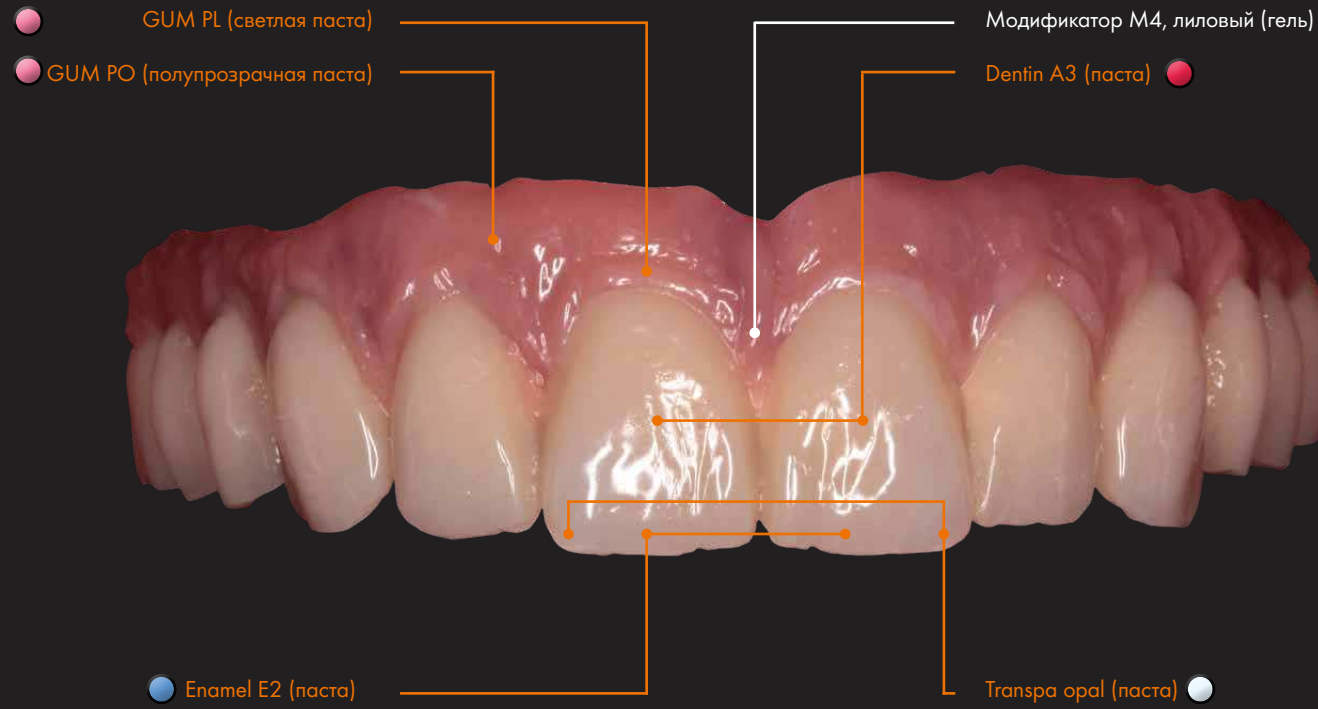


Фото: © 2018 Автор: з/т Андреас Людтке (Andreas Lüdtkе), Байройт, Германия


crea.lign
улучшенная
рецептура
ПАСТА



Естественный цветовой эффект
Идеальный баланс между опалесценцией, флуоресценцией и прозрачностью позволяет достигнуть естественного, живого цветового эффекта.
Кроющая способность и прозрачность зависят от толщины слоя. Кроющая способность возрастает по мере увеличения толщины слоя. Прозрачность демонстрирует обратную зависимость.
Резцовые массы crea.lign идеально подходят для использования с дентиновыми массами.

Простота моделирования
Более мягкая и эластичная консистенция. Простота придания формы. Без нежелательного склеивания, возможность передачи малейших переходов в процессе моделирования.

Пасты crea.lign

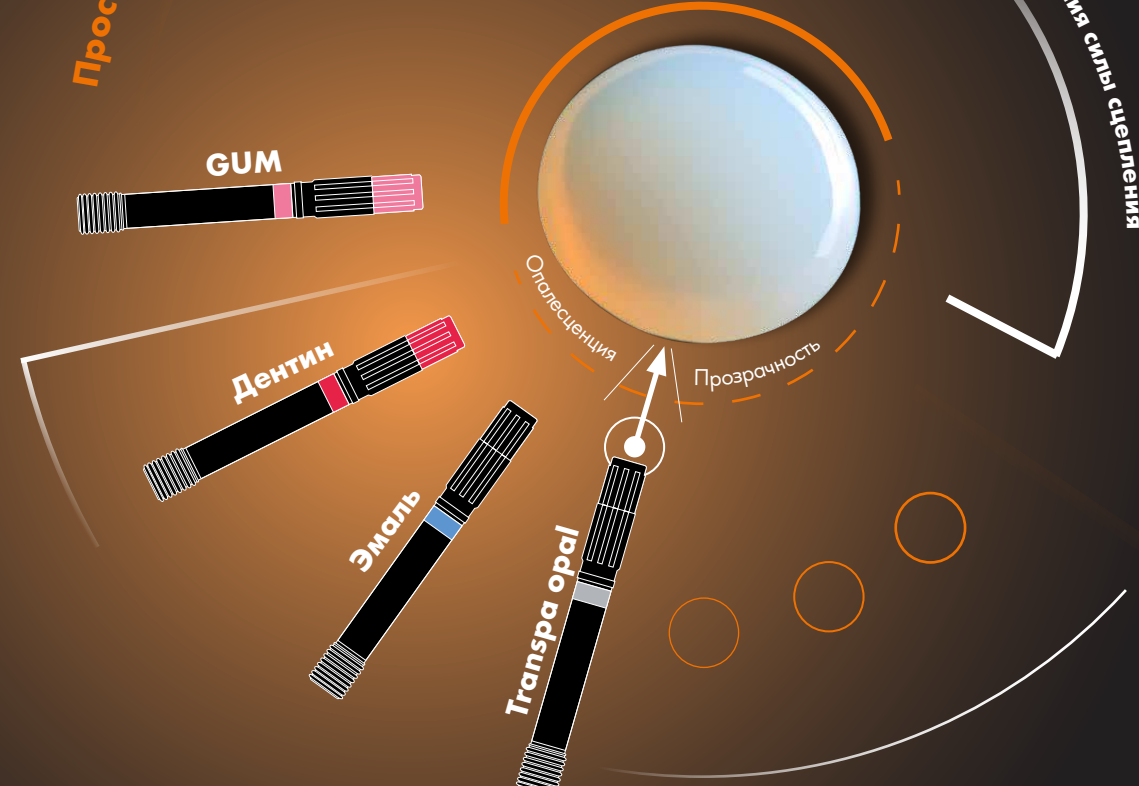

Благодаря содержанию наполнителя 60 % снижается степень усадки в процессе полимеризации.
Состав позволяет достигать большой глубины отверждения.
Применяемые керамические наполнители повышают устойчивость к истиранию и препятствуют образованию налета и изменению цвета.
Благодаря простоте полировки пасты crea.lign можно быстро достичь стойкого блеска.

Надежное и быстрое применение

Шероховатость поверхности после полировки [мкм]

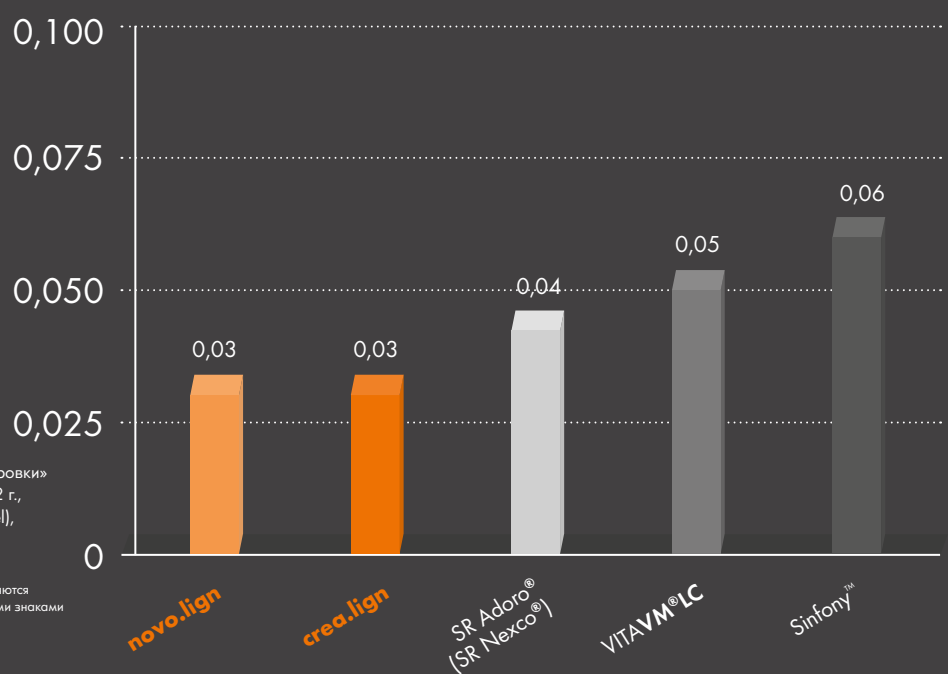


График «Шероховатость поверхности после полировки»
© Отчет об исследовании от 07 мая 2012 г., А. Жанин (A. Rzapny) и Р. Гебель (R. Göbel), Университетская клиника Иены, Германия

Все названия, обозначенные символом ® или ™, являются защищенными торговыми марками и/или фирменными знаками сторонних правообладателей.

